

YVD100



Tecnorita

by **BH**

Instrucciones de uso y garantía
Instruções de utilização e garantia

Le agradecemos la compra de nuestro EasyMove Magnet Pro YVD100

Todos nuestros productos están sometidos a los controles más rigurosos para garantizar la máxima calidad.

Para utilizar el EasyMove Magnet Pro YVD100 correctamente lea el manual en su totalidad antes del primer uso.

INTRODUCCIÓN

El dispositivo de gimnasia pasiva EasyMove Magnet Pro YVD100 le permitirá combatir de manera cómoda los efectos de la movilidad reducida y el sedentarismo, ya que produce un suave movimiento en las piernas que contribuye a mejorar la circulación sanguínea y activa los músculos sin la necesidad de salir de casa. El EasyMove Magnet Pro YVD100, además, dispone de un tratamiento de magnetoterapia de baja frecuencia que actúa en la planta de los pies y de un mando a distancia que permite disfrutar de este dispositivo sin tener que agacharse ni moverse. Para su total comodidad y disfrute el dispositivo dispone de un reproductor de música que gracias al enchufe USB le permitirá escuchar música durante sus sesiones sin preocuparse de tener un equipo de música a su lado.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

1. Inspeccione el aparato antes de empezar a utilizarlo para asegurarse que está en buenas condiciones de uso y que el cable no está dañado. Si observa algún defecto o la falta de alguna pieza, póngase en contacto con el distribuidor del producto.
2. Si tiene algún problema de salud debe consultar a su médico antes de empezar a utilizar el aparato.
3. El aparato no debe ser utilizado por niños o por personas con discapacidades sin la necesaria supervisión de un adulto.
4. Este aparato es de uso doméstico.
5. Si durante el uso del aparato no se encuentra cómodo deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico.
6. Un uso excesivo puede hacer que el aparato se sobrecaliente. Si esto ocurriera, deje enfriar el aparato.
7. No cubra el aparato durante su funcionamiento (por ejemplo con una manta o almohada) ya que se podría sobrecalentar y causar daños.
8. No utilice el aparato en lugares húmedos y evite que se moje. No toque el aparato con las manos húmedas durante su funcionamiento.
9. Para evitar lesiones y daños aleje las manos y otras partes del cuerpo del mecanismo cuando el aparato está en marcha.
10. No inserte ningún objeto en el aparato.
11. No se ponga de pie sobre el aparato.
12. No agarre el aparato por el cable, no lo aplaste.
13. No mueva el aparato tirando del cable.
14. Para evitar que se rompa, no enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
15. Apague el aparato por completo cuando haya terminado de usarlo y desenchúfelo.
16. No desconecte el aparato sin haberlo apagado antes.
17. Cuando se produzca un corte de corriente, desconecte el enchufe de la red eléctrica.
18. Para desenchufar el aparato de la red, tire del enchufe no del cable.
19. Para evitar fuego, daños o descargas eléctricas, debe usarse el voltaje correcto.
20. No exponga el aparato a altas temperaturas. Guárdelo en un lugar seco.
21. Si nota que el aparato no funciona correctamente, no lo intente reparar, desmontar o modificar. Reparaciones no autorizadas pueden causar daños, además de invalidar la garantía. Contacte con el servicio técnico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Adaptador de corriente de 24 V y 20 W;
- Magnetoterapia en las plantas de los pies;

- 30 niveles de velocidad;
- 3 programas preestablecidos;
- Altura ajustable del dispositivo;
- Mando a distancia;
- Peso neto y Bruto: 3.5 y 4.2 Kg.
- Medidas: 31 x 37.5 x 14.5 cm

DESCRIPCIÓN



Botón de encendido



Botón de modo automático – P1, P2, P3



Botón de modo manual (La pantalla mostrará HR)



Botón de control de la velocidad – Reducir la velocidad



Botón de control de la velocidad – Aumentar la velocidad



Función musica



Función musica: seleccionar la canción anterior



Función musica: seleccionar la canción siguiente



Función musica: reducir volumen



Función musica: aumentar volumen

MANDO A DISTANCIA



MODO DE FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana.
2. Conecte el aparato a la red.
3. Encienda el aparato a través del botón o del mando a distancia y elija el modo de uso Manual o Automático
4. Para apagar el aparato pulse el botón de apagado y desenchufe el dispositivo.

MODO MANUAL	MODO AUTOMATICO
30 NIVELES DE VELOCIDAD	P1: Rango de velocidades de 1 a 10: Cada minuto el dispositivo cambia la velocidad de 1 a 10 y de 10 a 1, repitiendo la secuencia de forma continua.
	P2: Rango de velocidades de 11 a 20: Cada minuto el dispositivo cambia la velocidad de 11 a 20 y de 20 a 11, repitiendo la secuencia de forma continua.
	P3: Rango de velocidades de 21 a 30: Cada minuto el dispositivo cambia la velocidad de 21 a 30 y de 30 a 21, repitiendo la secuencia de forma continua.

MAGNETOTERAPIA



El YVD100 ofrece un tratamiento adicional basado en la magnetoterapia. Pero ¿Que es la magnetoterapia?

La magnetoterapia es un tratamiento a través de los campos magnéticos. El uso de imanes para fines terapéuticos ha sido una práctica utilizada en muchas de las culturas ancestrales como por ejemplo la china, la hindú o la árabe. Desde la antigüedad un gran número de médicos y sanadores utilizaron los imanes para curar diferentes problemas médicos hasta que en el siglo XVI, el célebre Paracelso abogó por los imanes para curar trastornos específicos y describió con los diversos efectos curativos de las polaridades magnéticas en los seres vivos. Los campos magnéticos son capaces de penetrar en el cuerpo humano y pueden afectar el sistema nervioso, órganos y células, siendo que el polo negativo generalmente tiene un efecto calmante y el polo positivo excitante del metabolismo.

La aplicación de imanes conocida como Magnetoterapia, se practica en la Medicina Tradicional China al igual que la acupuntura o la digitopuntura, sobre los puntos específicos del cuerpo, según las teorías fundamentales de polaridad Yin-Yang, Excesos y Vacíos, o en las áreas afectadas.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar antes de limpiarlo.
2. Límpielo con un trapo suave y seco. No permita que el aparato entre en contacto con agua o cualquier otro líquido. No sumerja el aparato en ningún líquido para su limpieza. No utilice limpiadores abrasivos, cepillos, gasolina, keroseno, productos para limpieza de cristal o muebles o disolvente para limpiarlo.

Garantía

Este producto está garantizado por 2 años de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y garantía de los bienes de consumo, incorporada al derecho español en virtud de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo.

En este sentido, EXERCYCLE, S.L., provista de NIF B-01029032 y con domicilio en Vitoria, calle Zurrupitieta, 22, garantiza este producto.

Fecha de compra.-	Comprado en.-
Comprador.-	Sello del distribuidor.-

Por favor conserve la factura como comprobante de compra.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto, llamando al número de atención al cliente.

902 170 258

A BH agradece a compra do nosso EasyMove Magnet Pro YVD100. Todos os nossos equipamentos são submetidos a rigorosos controlos para garantir a máxima qualidade.

Antes da primeira utilização: Leia atentamente este manual antes de começar a utilizar o EasyMove Magnet Pro YVD100.

INTRODUÇÃO

Com o equipamento de ginástica passiva EasyMove Magnet Pro YVD100 poderá combater de uma forma confortável os efeitos da mobilidade reduzida e do sedentarismo, pois produz um suave movimento nas pernas, contribuindo para uma melhor circulação sanguínea e activação dos músculos sem a necessidade de sair de casa. O EasyMove Magnet Pro YVD100, também tem um tratamento de magnetoterapia de baixa frequência que age sobre as plantas dos pés, também inclui um controle remoto que permite que aprecie este equipamento sem ter que se dobrar ou mover. Para melhorar o seu conforto e maximizar o prazer na utilização, este equipamento possui um leitor de música através do plug USB que lhe permite ouvir música durante as sessões sem ter que se preocupar com a colocação de um aparelho de som ao seu lado.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

1. Verifique o equipamento antes de o começar a utilizar, certifique-se que está em boas condições de utilização e que o cabo eléctrico não está danificado. Caso detecte alguma anomalia ou falta de alguma peça, entre em contacto com o distribuidor do equipamento.
2. Caso tenha algum problema de saúde deve consultar o seu médico antes de começar a utilizar este equipamento.
3. O equipamento não deve ser utilizado por crianças ou pessoas incapacitadas sem a devida supervisão por um adulto.
4. Este equipamento foi concebido para ter um uso doméstico, no seu lar.
5. Se, durante a utilização do equipamento, sentir algum desconforto, acabe imediatamente com o exercício e consulte o seu médico.
6. O uso excessivo pode fazer com que haja um sobre-aquecimento no equipamento. Se isto acontecer, deixe arrefecer o equipamento.
7. Não cubra o equipamento durante o seu funcionamento (por exemplo, com uma manta ou almofada) já que poderá sobre-aquecer e causar danos irreversíveis no equipamento.
8. Não utilize o equipamento em lugares húmidos e evite que se molhe. Não toque no equipamento com as mãos húmidas, em especial durante o seu funcionamento.
9. Para evitar lesões e danos, mantenha as mãos afastadas do mecanismo em movimento quando o equipamento esteja em funcionamento.
10. Não coloque nenhum objecto estranho no equipamento.
11. Não se coloque em pé sobre o equipamento.
12. Não pegue no equipamento pelo cabo, embrulhe o cabo eléctrico de forma ordenada.
13. Não mova o equipamento puxando pelo cabo eléctrico.
14. Para evitar que o cabo se corte, não enrole o cabo de alimentação à volta do equipamento.
15. Desligue totalmente o equipamento sempre que tenha terminado de usar o seu equipamento, recorde de desligar a ficha da tomada.
16. Não retire a ficha do equipamento sem o ter desligado antes.
17. Em caso de falha de corrente, desligue a ficha da tomada da rede eléctrica.
18. Para desligar o equipamento da tomada eléctrica, desligue sempre utilizando a ficha e nunca puxando pelo cabo eléctrico.
19. Para evitar risco de incêndio, danos ou descargas eléctricas, deve utilizar a voltagem correcta.
20. Não exponha o equipamento a temperaturas altas. Guarde-o num lugar seco.
21. Se verificar que o equipamento não está a funcionar correctamente, não o tente reparar, desmontar ou modificar. As reparações não autorizadas podem causar danos, além de invalidar a garantia. Contacte o serviço técnico autorizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Transformador de 24 V e 20 W;
- Magnetoterapia nas plantas dos pés;
- 30 níveis de velocidade;
- 3 programas pré-definidos;
- Dispositivo ajustável em altura;
- Controlo remoto;
- Peso Líquido e Bruto: 3.5 e 4.2 Kg.
- Medidas: 31 x 37.5 x 14.5 cm

DESCRIÇÃO



Botão de ON/OFF



Botão de modo automático – P1, P2, P3



Botão de modo manual (A tecla mostra HR)



Botão de controlo de velocidade – Diminuir velocidade



Botão de controlo de velocidade – Aumentar velocidade



Função música



Função música: seleccionar a música anterior



Função música: seleccionar a próxima música.




Função música: diminuir o volume



Função música: aumentar o volume

CONTROLO REMOTO

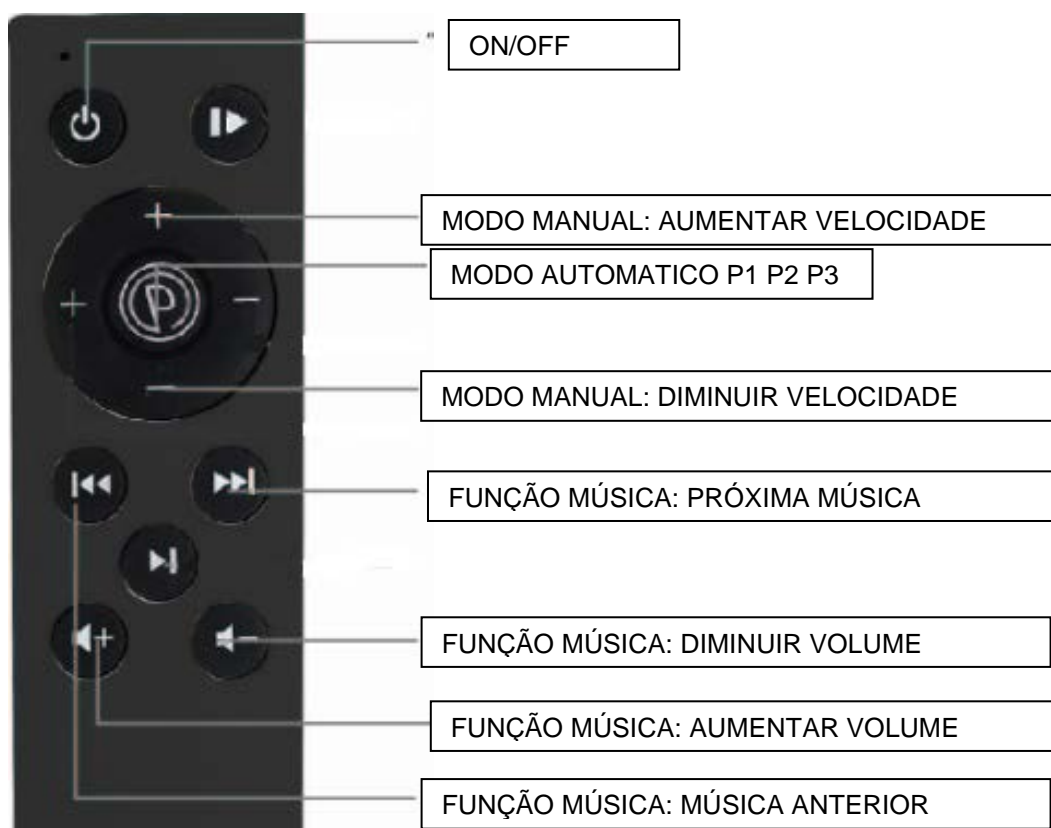

MODO DE FUNCIONAMENTO

1. Coloque o equipamento numa superfície plana.
2. Ligue o equipamento à tomada.
3. Desligue o dispositivo através do botão ou no controlo remoto e selecione o modo de manual ou automático.
4. Para desligar pressione o botão ON/OFF e desligue o dispositivo da tomada.

MODO MANUAL	MODO AUTOMÁTICO
30 NÍVEIS DE VELOCIDADE	P1: Gama de velocidade de 1 a 10: a cada minuto o dispositivo altera a velocidade de 1 a 10 e de 10 a 1, repetindo a sequência continuamente.
	P2: Gama de velocidade de 11 a 20: a cada minuto o dispositivo altera a velocidade de 11 a 20 e de 20 a 11, repetindo a sequência continuamente.
	P3: Gama de velocidade de 21 a 30: a cada minuto o dispositivo altera a velocidade de 21 a 30 e de 30 a 21, repetindo a sequência continuamente.

MAGNETOTERAPIA



O YVD100 oferece um tratamento adicional com base na Terapia Magnética, mas em que consiste esta terapia?

O tratamento de magnetoterapia é uma terapia utilizando os campos magnéticos. O uso de ímanes para fins terapêuticos tem sido uma prática utilizada em muitas culturas antigas, como a chinesa, indiana e árabe. Desde a antiguidade que um grande número de médicos e profissionais da medicina alternativa utilizam os ímanes para tratar vários problemas médicos, sendo que no século XVI, o famoso Paracelsus defendia os ímanes para curar doenças específicas e descreveu os vários efeitos curativos das polaridades magnéticas em seres vivos. Os campos magnéticos são capazes de penetrar o corpo humano e podem afectar o sistema nervoso, órgãos e células, sendo que o polo negativo geralmente tem um efeito calmante e o polo positivo tem um efeito estimulante no metabolismo.

A aplicação de ímanes conhecidos como Terapia Magnética, é praticada na medicina tradicional chinesa como a acupuntura ou acupressão em pontos específicos do corpo, de acordo com as teorias fundamentais da polaridade Yin-Yang, excessos e vazios, ou nas áreas afectadas.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1. Desligue o equipamento e deixe-o arrefecer antes de o limpar.
2. Limpe-o com um pano suave e seco. Não permita que o equipamento entre em contacto com a água ou qualquer outro líquido. Não submerja o aparelho em nenhum líquido de limpeza. Não utilize detergentes abrasivos, escovas, gasolina, querosene, produtos para limpeza de vidros ou solventes.

Garantia

Este produto tem uma garantia de 2 anos de acordo com o disposto na Directiva 1999/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Maio de 1999, sobre determinados aspectos de venda e garantia de bens de consumo, incorporada ao direito espanhol em virtude da Lei 23/2009, de 10 de Julho, sobre garantias na venda de bens de consumo.

Neste sentido, a EXERCYCLE, S.L., com o NIF B-01029032, sediada em Vitoria, calle Zurrupitieta, 22, garante este produto.

Data de compra	Comprado em
Comprador	Marca do distribuidor

Por favor, guarde a factura como comprovativo da compra.

Para qualquer consulta, não hesite em contactar-nos, telefonando para o número de apoio ao cliente.

00 34 902 170 258

BH FITNESS SPAIN
EXERCYCLE,S.L. (Manufacturer)
P.O.BOX 195
01080 VITORIA (SPAIN)
Tel.: +34 945 29 02 58
Fax: +34 945 29 00 49
e-mail: sat@bhfitness.com
www.bhfitness.com

POST-VENTA
Tel: +34 945 292 012 /
902 170 258
Fax: +34 945 56 05 27
e-mail: sat@bhfitness.com

BH FITNESS NORTH AMERICA
20155 Ellipse
Foothill Ranch
CA 92610
Tel: + 1 949 206 0330
Toll free: +1 866 325 2339
Fax: +1 949 206 0013
e-mail: fitness@bhnorthamerica.com
www.bhnorthamerica.com

BH FITNESS ASIA
BH Asia Ltd.
No.80, Jhongshan Rd.,
Daya Dist.,
Taichung City 42841,
Taiwan. R.O.C.
Tel.: +886 4 25609200
Fax: +886 4 25609280
E-mail: info@bhasia.com.tw

BH FITNESS PORTUGAL
MAQUINASPORT, APARELHOS DE DESPORTO, S.A.
Rua do Caminho Branco Lote 8, ZI Oiã 3770-068 Oiã
Oliveira do Bairro (PORTUGAL)
Tel.: +351 234 729 510
Fax: +351 234 729 519
e-mail: info@bhfitness.pt

BH SERVICE PORTUGAL
Tel.: +351 234 729 510
Fax: +351 234 729 519
e-mail: info@bhfitness.pt

BH FITNESS MEXICO
BH Exercycle de México S.A. de CV
Eje 132 / 136
Zona Industrial, 2A Secc.
78395 San Luis Potosí
S:L:P: MÉXICO
Tel.: +52 (444) 824 00 29
Fax: +52 (444) 824 00 31
www.bhlatam.com.mx

BH FITNESS CHINA
BH China Co., Ltd.
Block A, NO.68, Branch Lane 455, Lane 822,
Zhen Nan RD., Li Zi Yuan, Putuo, Shanghai 200331,
P.R.C.
Tel: +86-021-5284 6694
Fax:+86-021-5284 6814
e-mail: info@i-bh.cn

BH Germany GmbH
Altendorfer Str. 526
45355 Essen
Tel: +49 201 450910-0
e-mail: info@bhgermany.com

Kostenfreie Telefonnummer: 0800 0996655
Ersatzteile:
www.bhfitness.com

BH FITNESS UK
Tel: 02037347554
e-mail: sales.uk@bhfitness.com

AFTER SALES – UK
Tel.: 02074425525
e-mail: service.uk@bhfitness.com

BH FITNESS FRANCE

SAV FRANCE
Tel : +33 0810 000 301
Fax : +33 0810 000 290
savfrance@bhfitness.com

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.
SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO OUR PROGRAMME OF CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT.
BH SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPECIFICATIONS DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.
BH BEHALT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN DER MODELL-ANGABEN OHRE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.
DATI TECNICI E COMMERCIALI RELATIVI AGLI ARTICOLI DEL PRESENTE CATALOGO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO.
A BH RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS EQUIPAMENTOS SEM AVISO PRÉVIO.
DOOR KONSTANTE PRODUKTVERNIEUWING EN VERBETERING HOUDEN WIJ ONS HET RECHT VAN WIJZIGING VOOR ZONDER VOORAFGAAND BERICHT.